

DAS 12-KANAL-EKG-POWER-PAKET IM KOMPAKTFORMAT

CARDIOFAX Q ECG-9132: DAS 12-KANAL-EKG VON NIHON KOHDEN MIT
VERMESSUNG, INTERPRETATION UND DIN-A4-AUSDRUCK



Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**

DAS CARDIOFAX Q ECG-9132 IST EIN 12-KANAL

KOMPAKT UND KOMPLETT: DAS 12-KANAL-EKG-GERÄT FÜR DEN HARTEN DAUEREINSATZ IN KLINIK UND PRAXIS

Gerade für den niedergelassenen Arzt oder den harten mobilen Einsatz Tag für Tag in der Klinik werden effiziente, zuverlässige und komfortable Geräte gefordert, die den Kostenrahmen nicht sprengen.

Mit dem Elektrokardiographen CARDIOFAX Q ECG-9132 stellt NIHON KOHDEN ein Gerät vor, das genau auf diesen Einsatzbereich zugeschnitten ist.

12 ABLEITUNGEN SIMULTAN – GESTOCHEN SCHARF UND BEI- SPIELHAFT ÜBERSICHTLICH

Das CARDIOFAX Q 12-Kanal EKG liefert immer präzise, klare Informationen. Ob auf dem hochauflösenden hinterleuchteten 320x240 dot LCD-Bildschirm oder im großformatigen DIN-A4-Ausdruck mit dem Thermokammschreiber von 12 Ableitungen simultan. Die Ableitungen, Kurven und Analyseergebnisse kommen stets gestochen scharf und sind gut zu erfassen.



AL-EKG-GERÄT IM KOMPAKTFORMAT


DATEN-EINGABE, DATEN-ANALYSE, DATEN-TRANSFER, DATEN-SPEICHERUNG

Eine Besonderheit in dieser Geräteklasse ist, daß das bewährte Interpretationsprogramm ECAPS-12C mit 241 Befundungen und 5 Bewertungskriterien beim CARDIOFAX Q ECG zur Standardausstattung gehört. Standard sind auch zwei externe Signaleingänge und ein Analogausgang (zum Beispiel für Kontrollmonitore). Der Datenspeicher ist für bis zu 5400 Patienten mit 12-Kanal-EKG-Ableitungen von jeweils 10-24 Sekunden Dauer ausgelegt (mit optionaler PCMCIA Flash-Disk-Speicherkarte 64 MB); bei dieser Geräteversion sind auch die Eingaben aller relevanten Patientendaten über eine alpha-numerische Tastatur und der Datentransfer zum ECG-9320 oder zu einem PC (mit RS-232C Interface und optionaler Archivierungs-Software DMS) möglich.


DIE AKUSTISCHE KONTROLLE

Die akustische Kontrollfunktion ermöglicht es, die Aufnahmequalität schon vor dem Ausschrieb zu überprüfen oder während der Aufzeichnung von weitem

zu kontrollieren (EMG-Artefakte oder Wechselstromestreunungen); dies ist eine nützliche Funktion, die sich im medizinischen Alltag als sehr hilfreich erwiesen hat.

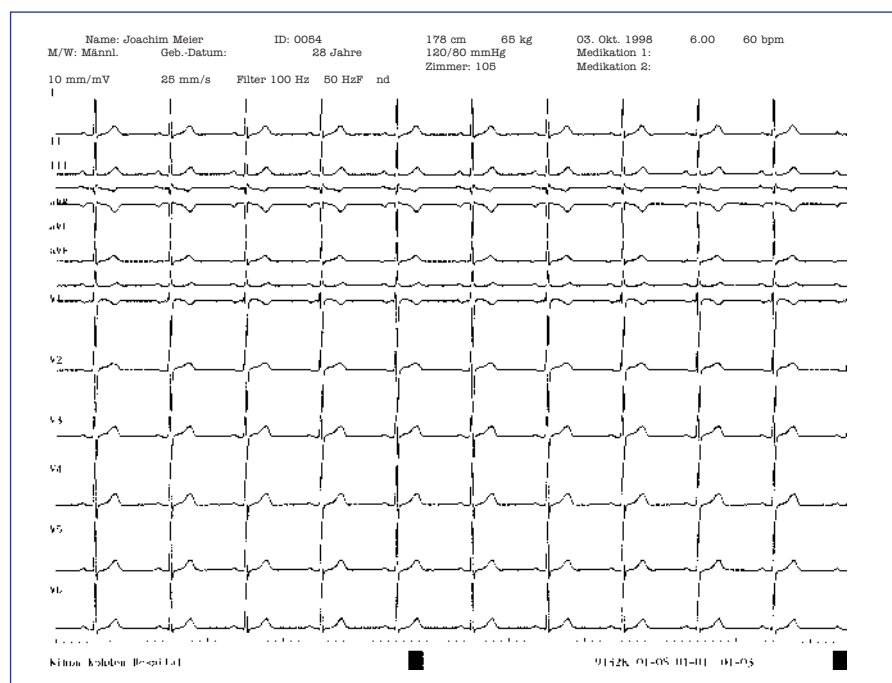

12 Ableitungen: übersichtlicher, gestochener scharfer Ausdruck im A4-Format

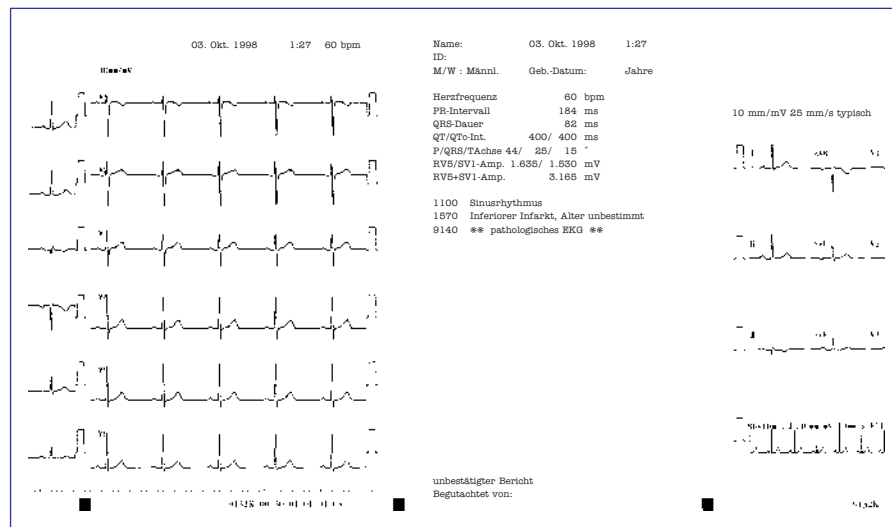

Die Analyseergebnisse – ein beispielhafter Ausdruck mit dem Interpretationsprogramm ECAPS-12C

DER LEISTUNGSSTANDARD

- 12 Ableitungen (simultan)
- 1-Minuten-Rhythmusaufzeichnung im 1-Seiten-Format
- Periodische Aufzeichnung
- EKG-Vermessungsprogramm
- EKG-Interpretationsprogramm
- Netz- und Akkubetrieb
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Zeitsteuerprogramm für Streß-Tests
- Hochauflösender Thermokammschreiber (210 mm Papierbreite)
- 3-, 4-, 6- und 12-Kanal-Ausschrieb im DIN-A4-Format
- Kopierfunktion
- Akustische Aufnahmekontrolle
- 2 externe Signaleingänge
- Analogausgang für Kontrollmonitor
- Hochauflösendes LCD-Display mit simultaner 12-Kanal-EKG-Darstellung, Herzfrequenz- und Artefaktanzeige
- Integrierte alpha-numerische Tastatur
- Serielle Schnittstelle RS-232C
- Integriertes PCMCIA-Laufwerk für Datenspeicherung
- Datenübertragung an ECG-9320 oder (mit optionaler DMS-Software) an PC's

OPTIONEN

- Datenbank-Management-Software DMS
- Gerätewagen KD-104E
- Befestigungsplatte DI-106D (für KD-104E)
- Patientenkabelhalterung KH-801E
- Flash-Disk-Speicherkarte 64 MB



CARDIOFAX Q ECG-9132 mit KD-104E, DI-106D und KH-801E

Leistungs-Tabelle	
	ECG-9132
12 Ableitungen	✓
Anzahl der Kanäle für EKG-Ausschrieb	3, 4, 6, 12
Rhythmusableitung	✓
Periodische Aufzeichnung	✓
EKG-Vermessungsprogramm	✓
EKG-Interpretationsprogramm	✓
Netz- und Akkubetrieb	✓
Hochauflösendes LCD-Display	✓
Alpha-numerische Dateneingabe	✓
Interne Datenspeicherung	✓
Datenübertragung	✓

9132 02/05 Änderungen vorbehalten

Überreicht durch:



NIHON KOHDEN EUROPE GmbH,
 Raiffeisenstraße 10, D-61191 Rosbach v. d. H.,
 Telefon: +49(0)60 03/8 27-0, Telefax: +49(0)60 03/8 27-5 99
 Internet: www.nihonkohden.de, www.nihonkohden.com
 E-Mail: info@nke.de